

3Shape TRIOS

Impress Your Patients

DIO·Pars
Official Distributor


شرکت دایوپارس نماینده رسمی شرکت 3Shape دانمارک در ایران





3Shape TRIOS

Wireless

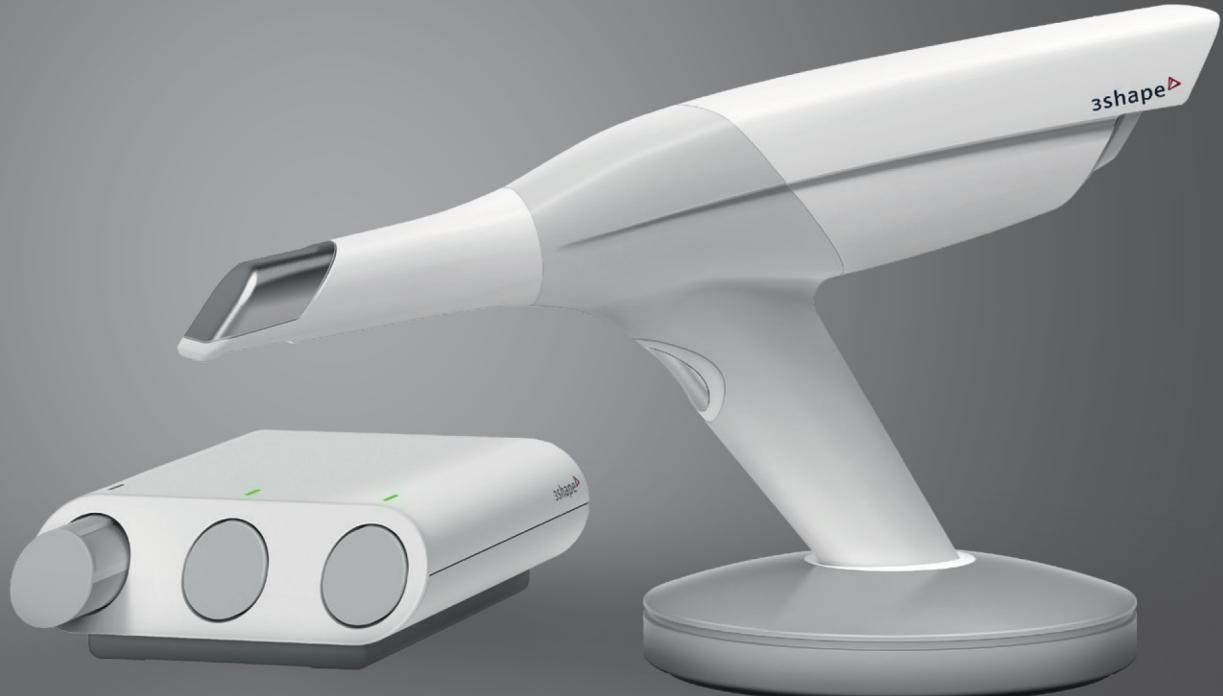

3Shape TRIOS

Impress Your Patients

DIO•Pars
Official Distributor



شرکت 3Shape

شرکت 3Shape واقع در دانمارک، از تولید کنندگان سرآمد اسکنر های داخل دهانی در جهان است. اسکنر داخل دهانی طبق نظر بسیاری از کارشناسان بهترین برنده اسکنر داخل دهانی در بازار جهانی محسوب می شود. این محصول پزشکان زیادی در حوزه های مختلف علم دندانپزشکی (ایمپلنتولوژیست ها، ارتودونتیست ها، پریودونتیست ها و ...) را در حال حاضر در لیست کاربران خود دارد. خدمات شرکت 3Shape محدود به فروش اسکنر نیست بلکه آپدیت سالانه نرم افزار و محصول، کلاس ها و دوره های حضوری و آنلاین، تعویض قطعات و ارتقاء محصول به ورژن های جدید تر را نیز شامل می شود.

شرکت دایوپارس به عنوان نماینده رسمی شرکت 3Shape در ایران، مفتخر است که با ارائه این محصول و تمامی خدمات پیرامون آن گام مثبتی در حوزه گسترش دندانپزشکی دیجیتال در ایران بردارد. شرکت دایوپارس علاوه بر فروش اسکنرهای داخل دهانی 3Shape محصول شرکت TRIOS، برنامه های جامع آموزشی و پشتیبانی این محصول را در دستور کار خود قرار داده است تا مشتریان محترم شرکت بتوانند بهترین و بیشترین فایده ممکن را از محصول خریداری شده ببرند.

برنامه های شرکت دایوپارس برای دندانپزشکان محترم در زمینه محصول اسکنر داخل دهانی TRIOS شامل موارد زیر می باشد

- ارائه اطلاعات کامل در زمینه محصول، کاربردها و ویژگی های نرم افزاری و سخت افزاری محصول به دندانپزشکان
- ارائه اطلاعات و آموزش های لازم به دندانپزشکان درخصوص نحوه استفاده از آموزش های مستمر و آنلاین شرکت 3Shape برای مشتریان به منظور استفاده بیینه از دستگاه خریداری شده
- دموی محصول در صورت درخواست دندانپزشکان برای آشنایی بیشتر با محصول و کارآئی های آن
- آموزش نرم افزارهای مرتبط با دستگاه اسکنر برای خریداران توسط تیم های آموزش دیده شرکت دایوپارس و تیم های

شرکت 3Shape
• نصب و آموزش اولیه آغاز به کار با دستگاه در محل کلینیک دندانپزشک
• سرویس و پشتیبانی و خدمات پس از فروش در صورت گونه مشکل در دستگاه خریداری شده از شرکت دایوپارس

• تأمین قطعات و ملزمات مصرفی و یدکی دستگاه های خریداری شده از شرکت دایوپارس
با توجه به اینکه شرکت دایوپارس دارای ۱۸ شعبه و بیش از ۱۰۰ نفر نیروی انسانی کارآمد و متخصص در شهرهای مختلف ایران است، این شرکت می تواند کلیه خدمات فوق را به همه دندانپزشکان محترم در سراسر ایران عرضه کند.



تريوس TRIOS

(تريوس) نام تجاري اسکنرهای داخل دهانی شرکت **3Shape** می باشد. اين اسکن به دندانپزشك كمک می کند با قالب گيري ديجيتال، پروتزها و سايير ملزومات دندانپزشكى ديجيتال را به روش CAD/CAM آماده كند و به بيماران عرضه نماید. استفاده از اسکنرهای داخل دهانی تريوس، تجربه منحصر بفردی را برای دندانپزشكان به همراه دارد. اسکن بسيار سريع، بسيار دقيق و با رنگ های كامل واقعی، نياز دندانپزشك را به قالب گيري سنتی با مواد قالب گيري از بين می برد. محصول **3** آخرین نسل از محصولات شرکت **3Shape** است که در حال حاضر در سراسر جهان عرضه می شود.

چرا قالب گيري باید ديجيتال انجام شود؟

- بيشترین دقت سيستماتيک و كمترین خطاي انساني
- ذخيره زمان و امكان ويزيت بيماران بيشتر توسط دندانپزشك (در نتيجه آزادشدن Chairtime)
- قالب گيري به آسان ترين روش ممکن
- رضایت بيشتر بيمار
- صرفه جویی در مواد قالب گيري و هزینه های ارسال قالب

يافته های يك پژوهش جديد نشان می دهد که بيش از پنجاه درصد دندانپزشكان سراسر جهان طی سه سال آتی به سيستم های ديجيتال و اسکنرهای داخل دهانی مجهز خواهند شد

50%

تمامی محصولات **TRIOS** دارای يك سال گارانتي، نصب و آموزش رايگان می باشد

3Shape TRIOS


Impress Your Patients



Impress Your Patients



چرا برای قالب گیری دیجیتال از اسکنتر تریوس TRIOS استفاده کنیم؟

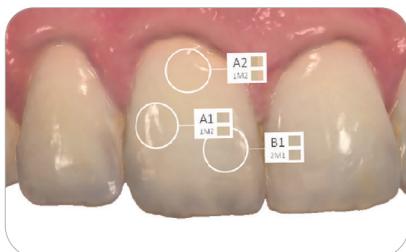

- تشخیص رنگ واقعی دهان و دندان
- دقیق در زمان اسکن Shade Measurement •



- قابلیت عکسبرداری HD از فضای داخل دهان و دندان ها
- انعطاف بالای دستگاه در قبال هر نوع استفاده کلینیکی
- پیشرفته ترین تکنولوژی اسکنرهای داخل دهانی



- تشخیص دقیق Margin line
 - بیشترین کاربرد و Indication در مقایسه با سایر اسکنرهای اسکن
 - اطمینان از نتایج درمانی و نشست پروتز نهایی
- (اثبات شده در مطالعات دانشگاهی)



- نصب و کاربری آسان
- اسکن سریع، دقیق و آسان
- بهبود ارتباط و تعامل با بیماران با ارائه اسکن کاملا مشابه با دهان بیمار

5 Reasons to Choose TRIOS



پیشرفته ترین تکنولوژی
اسکنرهای داخل دهانی



منعطف با هر نوع
استفاده کلینیکی



بیشترین کاربرد و
Indication



نصب و کاربری آسان
(Open System)



تشخیص رنگ دندان
و عکسبرداری HD

کاربردها

Indications



- اسکن Bridge و Crown - راهنمای اصلاح و تراش و حداقل کردن Undercut ها به همراه Sub Gingival Preparation. تریوس در همه پروژه ها قابل اطمینان است حتی پروژه های فک کامل (Full Mouth).



- Veneer, Inlay and Onlay - Pre-Preparation Scanning اسکن قبل از تراش. ثبت دقیق نقاط Mesial و Distal.



- شیوه ی دقیق و منحصر بفرد 3Shape Post and Core - قادر می سازد تا به راحتی عمق دقیق و موقعیت کanal ریشه را اسکن کنید.



- پروتز های پارسیل متحرک - اسکن فوق العاده بافت نرم لثه با توجه به طرح پالاتال



- اسکن موقعیت ایمپلنت با اسکن بادی به راحتی طراحی و ساخت انواع پروتز های مبتنی بر ایمپلنت را امکانپذیر می سازد.



- طرح درمان ایمپلنت و ساخت Surgical Guide - با استفاده از تریوس و نرم افزار Implant Studio، به راحتی راهنمای جراحی و پروتز بیمار را طراحی کنید.



- از اسکن TRIOS در نرم افزار Ortho Analyzer جهت تحلیل، طراحی و ساخت طرح درمان و لوازم ارتودنسی استفاده کنید.

در هنگام خرید دستگاه اسکنتر تریوس 3 چه گزینه هایی دارید

اسکنرهای تریوس در مجموعه‌ای از مدل‌ها و قیمت‌های مختلف برای پاسخگویی به نیازهای مختلف دندانپزشکان عرضه می‌شود.

- گزینه اول: اسکنر بی سیم یا با سیم
- گزینه دوم: اسکنر کارت یا پاد



(CART or Pod) / (Wireless or wierd)

- گزینه سوم: اسکنر با دسته یا بدون دسته



(Hand Grip or Pen Grip)

- گزینه چهارم: اسکنر سیاه و سفید یا رنگی




(Color or Mono)

نرم افزار Dental System

Industry-Leading Scanning and CAD Solution

برای اینکه کسب و کار دندانپزشکی دیجیتال خود را به صورت اقتصادی انجام دهید، شما نیاز به یک راهکار سریع، دقیق، کاربرپسند و امن دارید. نرم افزار Dental System یک ابزار همه فن حرفی برای طراحی هر نوع پروتز دندانی است. اکوسیستم دیجیتال جامع و باز شرکت 3Shape با امکان ارائه فایل خروجی با فرمت STL به شما امکان می دهد که دامنه ارتباطی خود را افزایش دهید و امروز پاسخگوی نیاز فردایتان باشید!

Open System

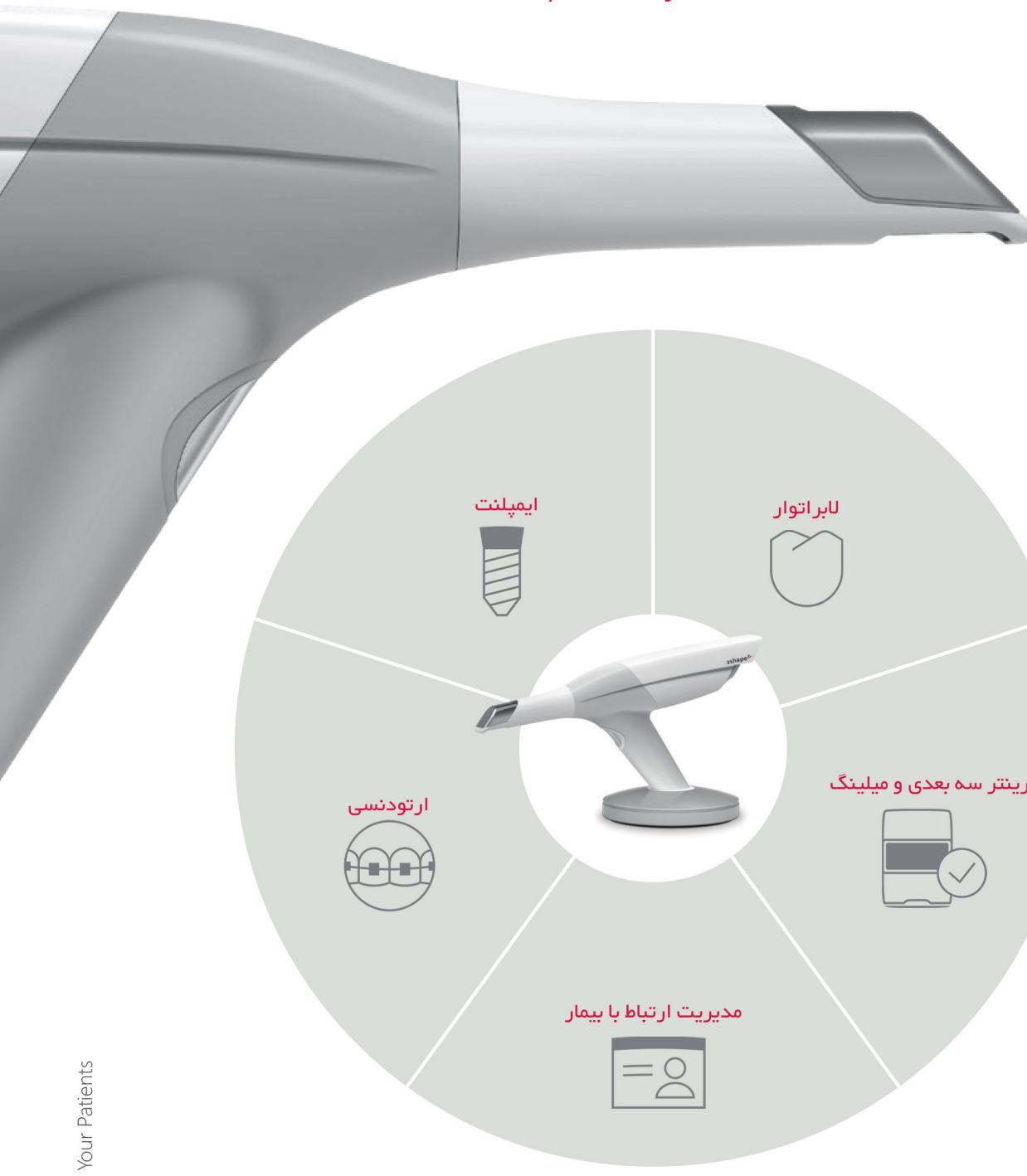

بسته های نرم افزاری TRIOS

1-TRIOS Inbox

محل ذخیره برای دریافت مدل های اسکن شده با آپشن ارائه مدل STL شامل ورژن آزمایشی Dental System (فقط ذخیره ۲۰ مدل)

2-Dental System-TRIOS only

نرم افزار Dental System Premium نسخه که کاربرد آن شامل اسکن های سیستم TRIOS می شود، شامل محل ذخیره اطلاعات (Model Builder) برای اسکن های TRIOS only است.

3-3Shape Ortho System

4-3Shape Implant Studio

نرم افزارهای قابل اضافه شدن Add-ons

1-TRIOS Scan Export (STL)

امکان ذخیره خروجی با فرمت STL را از اسکنرهای TRIOS فراهم می کند.

2-3Shape Ortho System Add-ons and Related Software

3-3Shape Implant Studio Add-ons and Related Software

4-TRIOS Design Studio

نرم افزار TRIOS یک نرم افزار طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) است که به منظور کاهش پرسه طراحی و ساخت قطعات ترمیمی و انجام One Day Restoration استفاده می شود. این نرم افزار که فرآیند کار در کلینیک ها را پسیار آسان کرده و با فشار دادن چند بار دکمه next کل فرآیند را انجام داده و به انتهای می رساند. شرکت 3Shape از این قابلیت به عنوان next-next-next طراحی یاد می کند.

نرم افزار TRIOS Design Studio بر اساس پلتفرم جدید (Dental Desktop) طراحی شده است که به کاربران اجازه می دهد تا هر دو امکان جریان کاری send to lab و in-house را داشته باشند و هر یک از فعالیت های طراحی و تولید را بسته به امکانات و قابلیت های موجود، در کلینیک خود انجام داده یا به لابراتوار بسپارند.




جزییات

نرم افزار کامل Design Studio با اسکنر عرضه خواهد شد.
اخذ خروجی STL از مدل طراحی شده قابل ارایه است.

لایسنس نرم افزار CAM داخل پک گنجانده نشده است (نصب جداگانه، که بر حسب ماشین تراشکاری تغییر می کند)

سایر قابلیت های نرم افزاری

3Shape Orthodontics
قابلیت طراحی درمان ارتودنسی دیجیتال
Invisalign سازگار با

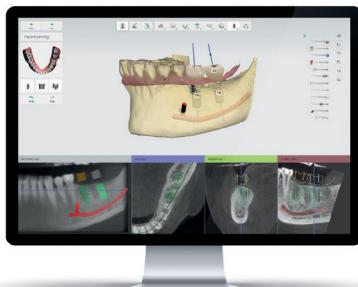


3Shape Implant Studio
قابلیت بهبود درمان ایمپلنتی
با استفاده از طراحی دیجیتال درمان و گاید جراحی



سایر قابلیت های نرم افزاری (Coming Soon)

- مانیتور کردن تغییرات دندانی در طول زمان، قابلیت برنامه ریزی های پیشگیرانه را افزایش می دهد.
- بررسی و ثبت حرکات فک مختص هر بیمار، طراحی درمان را دقیق تر می سازد.
- قابلیت طراحی لبخند بیمار در زمان ایجاد طرح درمان، زیبایی کار نهایی را افزایش می دهد.

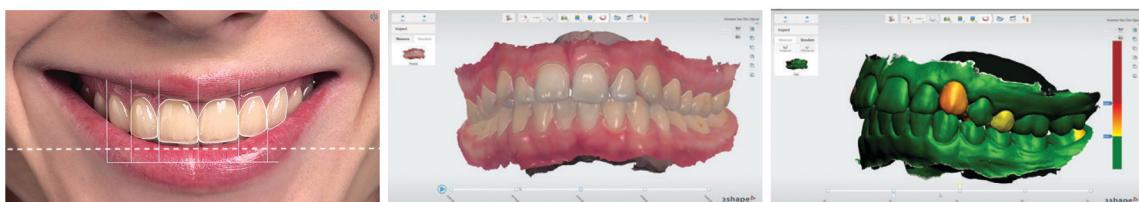

پروسه کلی کار (One Day Restoration) با نرم افزار

آغاز فرآیند با اسکن داخل دهانی (قالبگیری دیجیتال)



TRIOS Design Studio

نرم افزاری که از مشاهده فایل اسکن شده تا طراحی مدل و سفارش به لبراتوار در آن امکان‌ذییر است.



ماشینی که می خواهد برای شما طراحی کند را انتخاب کنید، تولید را با هر ماده و محصول سازگار
(دستگاه تراشکاری و چاپگر سه بعدی) با TRIOS به اتمام برسانید





3Shape TRIOS

Impress Your Patients



3Shape TRIOS

Product Catalogue

3Shape TRIOS 3 Wireless

3Shape TRIOS 3

3Shape TRIOS 3 Mono



TRIOS 3 wireless CART

Digital Impression System

System Configuration

مشخصات سیستم

- مدل CART (دارای کارت حافظه و شبکه)
- قابلیت صفحه لمسی Wireless (بی سیم)
- اتصال مطمئن به اینترنت
- سیستم پوینده کامپیوتر با عملکرد عالی برای اسکن سه بعدی داخل دهان
- قابلیت جابجایی آسان بین واحد های درمانی

مشخصات اسکنر

- اسکنر بی سیم با طراحی ارگونومیک برای کنترل راحت در دست
- تکنولوژی بخش بندی نوری فوق سریع Ultrafast Optical Sectioning Technology
- بدون نیاز به پودر و اسپری برای اسکن
- اسکن تمام رنگ ، توانایی انتخاب و تشخیص دقیق رنگ (Shade Measurement) از دندان
- اضافه کردن تصاویر HD به مدل سه بعدی اسکن شده
- قابل ارائه در دو مدل Grip و Handle

نرم افزار

- TRIOS Digital Impression Software with Integrated 3Shape Communicate Interface

قطعات و لوازم جانبی

- کابل برق
- کابل LAN شبکه (۵ متر)
- یک آدپتور واپرلس
- یک شارژر برای باتری های TRIOS 3 Wireless شامل (سه باتری)
- پنج عدد تیپ اسکنر TRIOS 3 دارای آینه (قابل اتوکلاو)
- تیپ حفاظتی TRIOS 3
- تیپ کالیبراسیون TRIOS 3
- کیت کالیبراسیون رنگی TRIOS 3
- Wi-Fi مازول
- مازول بلوتوث
- اتصال اکسترناł USB

مستندات (Documentation)

- مستندات کاربر TRIOS شامل اینمنی سیستم Setup و راهنمای TRIOS
- راهنمای آنلاین TRIOS (دسترسی مستقیم از طریق نرم افزار TRIOS)
- مرکز آموزش آنلاین TRIOS (دسترسی مستقیم از طریق نرم افزار TRIOS)

Optional

(انتخابی)

Extended Warranty (افزایش گارانتی): گارانتی سخت افزاری یکساله 3Shape این قابلیت را دارد که به مدت ۱ یا ۲ سال اضافه شود.



TRIOS 3 wireless Pod Digital Impression System

System Configuration

مشخصات سیستم

- قابلیت اتصال آسان به لپ تاپ
- جایگزینی مناسب برای سیستم CART ، قابل حمل و استفاده آسان برای کاربر
- مناسب برای پزشکان شاغل در چند مرکز یا دارای فضای محدود در کلینیک
- پک محصول شامل کامپیوتر نیست ، شما می توانید سیستم های مناسب را در کاتالوگ PC ببینید و نسبت به تهیه سیستم مورد نظر خود اقدام نمایید

مشخصات اسکنر

- اسکنر وايرلس با طراحی ارگونومیک برای کنترل راحت در دست
- تکنولوژی بخش بندی نوری فوق سریع Ultrafast Optical Sectioning Technology
- بدون نیاز به پودر و اسپری برای اسکن
- اسکن تمام رنگی ، توانایی انتخاب و تشخیص دقیق رنگ (Shade Measurement) از دندان
- اضافه کردن تصاویر HD به مدل سه بعدی اسکن شده
- قابل ارائه در دو مدل Grip و Handle

نرم افزار

- TRIOS Digital Impression Software with Integrated 3Shape Communicate Interface

قطعات و لوازم جانبی

- کابل برق
- کابل LAN شبکه (5 متر)
- یک آدپتور وايرلس
- یک شارژر برای باتری های TRIOS 3 Wireless TRIOS شامل (سه باتری)
- USB Dongle به همراه نرم افزار
- پنج عدد تیپ اسکنر 3 دارای آینه (قابل اتوكلاو)
- تیپ حفاظتی 3 TRIOS
- تیپ کالیبراسیون 3 TRIOS
- کیت کالیبراسیون رنگی 3 TRIOS

مستندات (Documentation)

- مستندات کاربر TRIOS شامل اینمنی سیستم Setup و راهنمای TRIOS (قابل چاپ و دسترسی مستقیم از طریق نرم افزار TRIOS)
- راهنمای آنلاین TRIOS (دسترسی مستقیم از طریق نرم افزار TRIOS)
- مرکز آموزش آنلاین TRIOS (دسترسی مستقیم از طریق نرم افزار TRIOS)

Optional

(انتخابی)

- کامپیوتر برای TRIOS مدل پاد: کامپیوترهای مورد تایید شرکت 3shape های مورد تایید شرکت قابل مشاهده می باشد.
- تعدادی از این کامپیوترها را می توانید از طریق شرکت 3shape تهیه نمایید.
- (افزایش گارانتی) : گارانتی سخت افزاری یکساله Extended Warranty این قابلیت را دارد که به مدت ۱ یا ۲ سال اضافه شود.



TRIOS 3 CART

Digital Impression System

System Configuration

مشخصات سیستم

- مدل CART (دارای کارت حافظه و شبکه)
- قابلیت صفحه لمسی (لمس چند نقطه همزمان)
- اتصال مطمئن به اینترنت
- سیستم پوینه کامپیوتر با عملکرد عالی برای اسکن سه بعدی داخل دهان
- قابلیت جابجایی آسان بین واحد های درمانی

مشخصات اسکنر

- اسکنر با طراحی ارگونومیک برای کنترل راحت در دست
- تکنولوژی بخش بندی نوری فوق سریع Ultrafast Optical Sectioning Technology
- بدون نیاز به پودر و اسپری برای اسکن
- اسکن تمام رنگ ، توانایی انتخاب و تشخیص دقیق رنگ (Shade Measurement) از دندان
- اضافه کردن تصاویر HD به مدل سه بعدی اسکن شده
- قابل ارائه در دو مدل Grip و Handle

نرم افزار

- TRIOS Digital Impression Software with Integrated 3Shape Communicate Interface

قطعات و لوازم جانبی

- کابل برق
- کابل LAN شبکه (۵ متر)
- پنج عدد تیپ اسکنر 3 TRIOS دارای آینه (قابل اتوکلاو)
- تیپ حفاظتی 3 TRIOS
- تیپ کالیبراسیون 3 TRIOS
- کیت کالیبراسیون رنگی 3 TRIOS
- Wi-Fi مازول
- مازول بلوتوث
- اتصال اکسترنال USB

مستندات (Documentation)

- مستندات کاربری TRIOS شامل اینمنی سیستم Set up و راهنمای TRIOS
- راهنمای آنلاین TRIOS (دسترسی مستقیم از طریق نرم افزار TRIOS)
- مرکز آموزش آنلاین TRIOS (دسترسی مستقیم از طریق نرم افزار TRIOS)

Optional

(انتخابی)

Extended Warranty (افزایش گارانتی) : گارانتی سخت افزاری یکساله 3Shape این قابلیت را دارد که به مدت ۱ یا ۲ سال اضافه شود.



TRIOS 3 Pod

Digital Impression System

System Configuration

مشخصات سیستم

- قابلیت اتصال آسان به لپ تاپ
- جایگزینی مناسب برای سیستم CART ، قابل حمل و استفاده آسان برای کاربر
- مناسب برای پزشکان شاغل در چند مرکز یا دارای فضای محدود در کلینیک
- پک محصول شامل کامپیوتر نیست ، شما می توانید سیستم های مناسب را در کاتالوگ PC ببینید و نسبت به تهیه سیستم موردنظر خود اقدام نمایید.

مشخصات اسکنر

- اسکنر با طراحی ارگونومیک برای کنترل راحت در دست
- تکنولوژی بخش بندی نوری فوق سریع Ultrafast Optical Sectioning Technology
- بدون نیاز به پودر و اسپری برای اسکن
- اسکن تمام رنگی ، توانایی انتخاب و تشخیص دقیق رنگ (Shade Measurement) از دندان
- اضافه کردن تصاویر HD به مدل سه بعدی اسکن شده
- قابل ارائه در دو مدل Grip و Handle

نرم افزار

- TRIOS Digital Impression Software with Integrated 3Shape Communicate Interface

قطعات و لوازم جانبی

- کابل برق
- کابل اتصال به پایه (۱ متر)
- USB Dongle به همراه نرم افزار
- پنج عدد تیپ اسکنر TRIOS 3 دارای آینه (قابل اتوکلاو)
- تیپ حفاظتی TRIOS 3
- تیپ کالیبراسیون TRIOS 3
- کیت کالیبراسیون رنگی TRIOS 3

مستندات (Documentation)

- مستندات کاربر TRIOS شامل اینمی سیستم Setup و راهنمای TRIOS (قابل چاپ و دسترسی مستقیم از طریق نرم افزار TRIOS)
- راهنمای آنلاین TRIOS (دسترسی مستقیم از طریق نرم افزار TRIOS)
- مرکز آموزش آنلاین TRIOS (دسترسی مستقیم از طریق نرم افزار TRIOS)

Optional

(انتخابی)

- کامپیوتر برای TRIOS مدل پاد: کامپیوترهای مورد تأیید شرکت 3Shape های مورد تأیید شرکت قابل مشاهده می باشد. تعدادی از این کامپیوترها را می توانید از طریق شرکت 3Shape تهیه نمایید.
- افزایش گارانتی: گارانتی سخت افزاری یکساله 3Shape Extended Warranty این قابلیت را دارد که به مدت ۱ یا ۲ سال اضافه شود.



TRIOS 3 Mono Pod

Digital Impression System

System Configuration

مشخصات سیستم

- بدون نیاز به پودر و اسپری برای اسکن
- اسکن به صورت سیاه و سفید
- پک محصول شامل کامپیوتر نیست، شما می توانید سیستم های مناسب را در کاتالوگ PC ببینید و نسبت به تهیه سیستم مورد نظر خود اقدام نمایید.
- قابلیت بروز رسانی به مدل رنگی که شامل اضافه شدن تشخیص رنگ (Shade Measurement) و تصاویر HD به مدل اسکن شده است.

مشخصات اسکنر

- اتصال به لپ تاپ و کامپیوتر
- قابل حمل، استفاده آسان و جایگزینی مناسب برای سیستم کارت
- مناسب برای پزشکان شاغل در چند مرکز یا دارای فضای محدود در کلینیک

نرم افزار

- TRIOS Digital Impression Software With Integrated 3Shape Communicate Interface

قطعات و لوازم جانبی

- کابل برق
- کابل اتصال به پایه (1 متر)
- USB Dongle به همراه نرم افزار
- پنج عدد تیپ اسکنر TRIOS 3 دارای آینه (قابل انوکلاو)
- تیپ حفاظتی TRIOS 3
- تیپ کالیبراسیون TRIOS 3
- اتصال اکسترناال USB

مستندات (Documentation)

- مستندات کاربر TRIOS شامل اینمنی سیستم Set up سیستم (قابل چاپ و دسترسی مستقیم از طریق نرم افزار TRIOS)
- راهنمای آنلاین TRIOS (دسترسی مستقیم از طریق نرم افزار TRIOS)
- مرکز آموزش آنلاین TRIOS (دسترسی مستقیم از طریق نرم افزار TRIOS)

Optional

(انتخابی)

- کامپیوتر برای TRIOS مدل پاد: کامپیوترهای مورد تأیید شرکت 3Shape های مورد تأیید شرکت قابل مشاهده می باشد.
- تعدادی از این کامپیوترها را می توانید از طریق شرکت 3Shape تهیه نمایید.
- آفایش گارانتی: گارانتی سخت افزاری یکساله 3Shape Extended Warranty ۱ یا ۲ سال اضافه شود.

3Shape TRIOS

Impress Your Patients



لوازم جانبی و یدکی

Accessories and Spare Parts – TRIOS 3

تیپ های اسکنر قابل اتوکلاو به همراه آینه ها برای TRIOS 3
(محصول در زمان عرضه دارای سه تیپ است)



تیپ های حفاظتی برای اسکنر های TRIOS 3



تیپ کالیبراسیون اسکنر TRIOS 3
(محصول در زمان عرضه دارای یک تیپ است)



کیت کالیبراسیون رنگی TRIOS 3 قابلیت تشخیص رنگ (Shade Measurement) را برای سیستم ایجاد می کند که شامل یک کالیبراسیون رنگ و دو آداتور تیپ است



شارژر وايرلس برای سیستم Handle



شارژر وايرلس برای سیستم Pen



باتری های وايرلس قابل شارژ برای سیستم Handle (مدل TRIOS 3) در زمان تحویل محصول شامل سه باتری است



باتری های وايرلس قابل شارژ برای سیستم Pen (مدل TRIOS 3) باتری های قابل شارژ برای مدل TRIOS 3 Pen ایجاد می کند



کابل TRIOS 3 (طول کابل : ۸ متر ، قابلیت کار تا شعاع ۸ متری لپ تاپ را برای سیستم Pod ایجاد می کند)



کابل TRIOS 3 (طول کابل : ۵ متر ، قابلیت کار تا شعاع ۵ متری لپ تاپ را برای سیستم Pod ایجاد می کند)



Accessories and Spare Parts – TRIOS 3

کابل 3 TRIOS 3

(طول کابل : ۵ متر ، قابلیت کار تا شعاع ۲.۵ متری لپ تاپ را برای سیستم Pod ایجاد می کند)



نگهدارنده اسکنر
Wireless Pod handle
نگهدارنده مدل



پایه اسکنر Pod مدل pen
نگهدارنده اسکنر pen



پایه اسکنر Pod مدل handle
قابلیت اتصال مدل handle به کامپیوتر را در کلینیک های مختلف یا کلینیک های با
فضای محدود ایجاد می کند.



اسکنر TRIOS 3 مدل handle

قابلیت set up چندین اسکنر را با یک مجوز (license) ارائه می دهد
(فقط یک اسکنر در یک زمان قابل استفاده است)

(قابل استفاده در موقعیت های مکانی مختلف یا به عنوان back-up در زمان تعمیر)



اسکنر TRIOS 3 مدل Pen

قابلیت set up چندین اسکنر را با یک مجوز (license) ارائه می دهد
(فقط یک اسکنر در یک زمان قابل استفاده است)

(قابل استفاده در موقعیت های مکانی مختلف یا به عنوان back-up در زمان تعمیر)



اسکنر TRIOS 3 CART (بدون اسکنر)

استفاده در موقعیت های مکانی مختلف را تسهیل می کند
(فقط با جابجایی اسکنر می توان در مکان های مختلف از دستگاه استفاده کرد)



اسکن بادی های 3Shape



Post and core scan posts



3Shape ACADEMY

Impress Your Patients



همه مشتریان می توانند به صورت رایگان در سامانه آموزش **3Shape ACADEMY** عضو شده و از خدمات آموزشی منحصر بفرد شرکت **3Shape** که دائماً بروز رسانی می شوند، استفاده نمایند. کافی است با در دست داشتن اطلاعات training@3Shape.com support.3Shape.com بازدید نمایید یا با سامانه **3Shape** شامل دوره های منظم و منسجم در برای آموزش های سفارشی و شخصی تماس حاصل فرمایید . مرکز آموزش **3Shape** تمامی تست ها و مطالب توسط جامعه علمی شرکت **3Shape** که از ارکان و نظریه پردازان علم دندانپزشکی محسوب است. تمامی تست ها و مطالب توسط جامعه علمی شرکت **3Shape** که از ارکان و نظریه پردازان علم دندانپزشکی محسوب می شوند ارائه می شود.

Appendix– TRIOS 3

ضمایم A ضمیمه مشخصات فنی Trios 3 wireless/Trios 3/Trios 3 mono

مدل Pod	مدل Cart	مدل ها	
Trios3 Handle	Trios3 Pen Grip	Trios3 Handle	Trios3 Pen Grip
ارتفاع pod: 3.2cm قطر pod: 13 cm وزن: 950g کمتر از 340g وزن اسکنر: 340g	ارتفاع pod: 9.5cm قطر pod: 13 cm وزن: کمتر از 950g وزن اسکنر: 340g	ارتفاع: cm 113 عرض: cm 45 عمق کلا: cm 59 وزن: kg 45 وزن اسکنر: g 340	سایز و عرض
** بر حسب سیستم (لپ تاپ) انتخاب شده متغیر است			فضای ذخیره سازی GB 240 (با تخمین 20GB برای سیستم کاری استفاده می شود)
** بر حسب سیستم (لپ تاپ) انتخاب شده متغیر است			IEEE 802.11 b/g/n – 2.4 GHz اترنت سیمی گیگابایت DHCP IP اختصاصی اترنت
** بر حسب سیستم (لپ تاپ) انتخاب شده متغیر است			نمایش صفحه لمبی ۱۹ اینچ رزولوشن: ۱۲۸۰*۱۰۲۴
** بر حسب سیستم (لپ تاپ) انتخاب شده متغیر است			پردازشگر intel quad core i7 processor 3.6GHz
** بر حسب سیستم (لپ تاپ) انتخاب شده متغیر است			سیستم کاری Windows 7 embedded,64 bit
** بر حسب سیستم (لپ تاپ) انتخاب شده متغیر است			دکمه ها و اتصالات خارجی دکمه فعال سازی اسکنر (قرار گرفته بر دسته اسکنر) on/stand by زیر قاب مانیتور سوکت power (پشت سیستم کارت) USB (پر سرعت 12Mbit/s) ترمز برای چرخ ها : (پشت سیستم کارت)
** بر حسب سیستم (لپ تاپ) انتخاب شده متغیر است			ورودی/خروجی USB 2.0 connector برای خدمات سرویس
چینی،کرواتی،پچ،دانمارکی،انگلیسی،فنلاندی،فرانسوی،آلمانی،یونانی،مجارستانی،ایتالیایی،ژاپنی،کره ای،برزیلی،المیانی،پرتغالی (برزیل)،رومانیایی،روسی،اسپانیایی،سوئدی،ترکی (قابل تغییر در سیستم)			پشتیبانی زبان
** شرایط کاری، ذخیره و انتقال مورد (راهنمای امیت کار و set up را ببینید)*			نیازمندی های محیطی
(راهنمای امیت کار و set up را ببینید)*			ذخیره انرژی
(راهنمای امیت کار و set up را ببینید)*			تاییدیه
کرون،اینه،آلله،وپنیر،بریج (تا 5 واحد)،ایمپلنت های تک واحدی،پست و کور ، مدل کامل مطالعاتی شامل نواحی وستیبولا و پالاتال (ارتو) (این لیست در حال گسترش است)			موارد قابل پشتیبانی در حال حاضر
به طور کلی ، تمام متریال ها مورد پشتیبانی است به جز سینگ قیمتی رو دندان، برخی از برآکت های نیمه شفاف ارتدونسی، و فاز های به شدت براق			متربال های قابل اسکن مورد پشتیبانی
عدم نیاز به مواد کنترل است (پودر یا اسپری)			لزوم استفاده از مواد کنترل است اعمال به دندان
قابل استریل (با انوکلاو تا 150 بار) ، می تواند بر دو موقعیت قرار بگیرد ، اسکن از بالا و پائین			تیپ اسکنر
فرمت خروجی STL یا DCM (بر حسب پکیج نرم افزاری انتخاب شده)			اصول کار
Ultrafast Optimal Sectioning			منبع نوری LED

Appendix– TRIOS 3

ضمایم B ضمیمه مشخصات فنی Wireless Scanner

وزن اسکنر 384g شامل باتری (Pen Grip) و 373g شامل باتری (Handle)	
تکنولوژی 5GHz لیک ارتباطی واپرلیس با استفاده از نقطه دستیابی اختصاصی	
بازه کار ۵ متر	
زمان های مخصوص باتری Handle : ۳۵ دقیقه گرم شدن و ۵ دقیقه اسکن ادامه دار (برای باتری نو) Pen grip : ۲۰ دقیقه گرم شدن و ۵ دقیقه اسکن ادامه دار (برای باتری نو)	
زمان شارژ سه تا شش ساعت بر حسب میزان شارژ باتری از زمان که شارژ آغاز می شود	
طول عمر باتری (با تخمین) ۷۰٪ پس از 300 سیکل کاری و ۸۰٪ پس از 500 سیکل کاری 3Shape پیشنهاد می کند که پس از 500 سیکل کاری تعویض باتری را مد نظر قرار دهید.	

* راهنمای امیت کار و UP SET: آرین و رژن می تواند در وبسایت پشتیبانی شرکت 3Shape یافت شود.

** کامپیوتر باید از لیست "کامپیوتر های مناسب برای سیستم Pod" انتخاب شوند.

*** اسکن TRIOS نیاز دارد.

About 3Shape

3Shape is changing dentistry together with dental professionals across the world by developing innovations that provide superior dental care for patients. Our portfolio of 3D scanners and CAD/CAM software solutions for the dental industry includes the multiple award-winning 3Shape TRIOS intraoral scanner, the game-changing 3Shape X-4 1in1- CBCT scanner, and market-leading scanning and design software solutions for dental labs.

Two graduate students founded 3Shape in the year 2000, and today the company's fast-growing team of employees in 19 offices worldwide is serving customers in over 100 countries. 3Shape's products and innovations continue to challenge traditional methods, enabling dental professionals to treat more people more effectively.

Let's change dentistry together

ارائه بهترین خدمات پس از فروش محصولات 3Shape را از ما بخواهید



www.diopars.com

Tel/Fax : +98 21 42893

DIO•Pars
Member of DIO Implant

18&4 Floors, No.231, Citizen Bldg. Motahari St., Tehran, Iran